

BIO TEST

Your reliable home test kits series

فحص الإباضة المنزلي


التعليمات:

الرجاء قراءة التعليمات في هذه النشرة قبل البدء بإجراء الفحص. لا تستعلمي هذا الفحص بعد انتهاء مدة الصلاحية المطبوعة على الغلاف. احفظي الفحص في مكان جاف على درجة حرارة 2-30 درجة مئوية. لا تجمدي الفحص. لا تفتحي الفحص قبل أن تصل حرارته إلى درجة حرارة الغرفة وتكوني جاهزة لإجراء الفحص.

مبدأ الفحص:

الإباضة هي خروج البويضه من المبيض، ثم دخولها في قناة فالوب وهناك تكون جاهزة لعملية الإخصاب. يحدث الحمل نتيجة إخصاب البويضة بالحيوان المنوي خلال 24 ساعة من خروج البويضة. قبل الإباضة مباشرة، يفرز الجسم كميات كبيرة من هرمون الإباضة الذي يحفز خروج البويضة الناضجة من المبيض وتعرف هذه المرحلة باسم "تدفق هرمون الإباضة" والتي تتم في منتصف الدورة الشهرية حيث يحدث الحمل في هذه الفترة.

فحص بيوتست للإباضة يكشف عن وجود هرمون الإباضة في البول نتيجة تدفقه في الدم والذي يبني بحدوث الإباضة خلال الـ 24-36 ساعة القادمة. من المهم ملاحظة أن تدفق هرمون الإباضة وكذلك الإباضة قد لا تحدث خلال كل دورة شهرية.

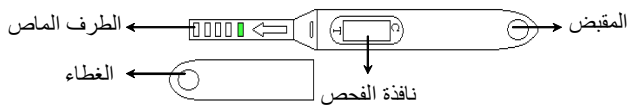

طريقة الاستعمال:

يحتوي فحص بيوتست للإباضة على ثلاثة فحوصات تسمح لك بإجراء الفحص خلال ثلاثة أيام لمعرفة يوم الإخصاب. قومي بحساب معدل مدة دورتك الشهرية. مدة الدورة الشهرية هو عدد الأيام من أول يوم في الدورة الشهرية (الحيض) حتى آخر يوم قبل بداية الدورة الشهرية القادمة. إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، اعتمدي مدة الدورة الشهرية الأقصر. يبين جدول فحص الإباضة اليوم الذي يجب أن تبدأ فيه بإجراء الفحص.

مثال:

إذا كانت مدة الدورة الشهرية 28 يوم، ابديني بالفحص بعد 11 يوم من أول يوم في آخر دورة شهرية. إذا كان أول يوم من الدورة الشهرية في الثالث من الشهر إبدأي الفحص في اليوم الثالث عشر من الشهر وهو اليوم الحادي عشر من بدء الدورة الشهرية.

جدول فحص الإباضة

عدد الأيام التي يجب انتظارها للقيام بالفحص بعد أول يوم من آخر دورة	مدة الدورة الشهرية بالأيام
6	21
6	22
7	23
7	24
8	25
9	26
10	27
11	28
12	29
13	30
14	31
15	32
16	33
17	34
18	35
18	36
20	37
21	38
22	39
23	40

السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1. قومي بتحديد وقت القيام بالفحص، يجب عدم استخدام أول كمية من البول في الصباح عند فحص هرمون الإباضة. للحصول على أفضل نتيجة، يجب القيام بالفحص كل يوم في نفس الوقت كما يجب التقليل من شرب السوائل قبل ساعتين من إجراء الفحص تقريبا.
2. ضعي غلاف الألمونيوم الذي يحتوي على الفحص في درجة حرارة الغرفة قبل فتحه ثم أخرجي الفحص من غلاف الألمونيوم واستخدميه في أسرع وقت ممكن.
3. أزيل الغطاء و تعرفي على الفحص (انظري الرسم أعلاه).
4. أمسكي بالفحص من المقبض و اجعلي الطرف الماص مباشرة في مجرى البول لمدة 10-15 ثانية حتى يترطب تماما. ملاحظة: يجب أن لا يصل البول إلى نافذة الفحص.
5. بعد الحصول على كمية البول المناسبة، ضعي الغطاء على الطرف الماص مباشرة. ضعي الفحص على سطح مستوي حيث تكون نافذة الفحص للأعلى ثم انتظري 3 دقائق حتى تظهر الخطوط.

عندما يبدأ الفحص بالعمل، يمكنك أن تلاحظي تدفق لون أحمر خفيف على طول نافذة الفحص. إذا لم تظهر أي نتيجة بعد ثلاثة دقائق، انتظري دقيقة أخرى. لا تقرني النتيجة بعد مرور 10 دقائق.

النتائج:

إيجابية	سلبية	غير معتمده
إذا ظهر خطان، وكان الخط في منطقة الفحص مماثل للخط الظاهر في منطقة القياس أو أعمق هذا يدل على أن الإباضة ستحصل خلال 24-36 ساعة، هذا اليوم هو أفضل الأيام لحدوث الإخصاب	إذا ظهر خطين، وكان الخط في منطقة الفحص اخف من منطقه القياس أو إذا لم يظهر أي خط في منطقة الفحص، هذا يدل على عدم تدفق هرمون الإباضة ويجب استمرار عملية الفحص بشكل يومي.	إذا لم يظهر أي خط في أي منطقة، نتيجة لعدم كفاية عينة البول أو خطأ في تقنية إجراء الفحص لا يظهر خط في منطقة القياس لذلك يجب إعادة الفحص باستخدام فحص جديد.

IFU-BT-LH-M.v1.2009

منتج للمملكة المتحدة
بيوتست هي علامة مسجلة لبيوتست
لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:
www.bio-test.info